

EN Cross Linked 2 teeth are highly cross linked polymethylmethacrylate teeth. High quality raw materials along with an adequate technological production procedure assure the colour and heat stability of the teeth, a high resistance to abrasion and solvents as well as a durable adhesion with the denture base material. Cross Linked 2 teeth consist of 18 different moulds of upper anterior teeth which are subdivided into 3 groups (the oval, square and triangular group), of 7 different moulds of lower anterior and of 6 different moulds of posterior teeth. Cross Linked 2 teeth are successfully fitted into partial and total prothesis as they perfectly replace the teeth of the patients.

** Roughen and wet the ridge lap surface of artificial teeth with dental monomer liquid to achieve better bonding to the denture base.*

* In case that any serious incident has occurred in relation to the device it should be reported to the manufacturer (Polident d.o.o., vigilanca@polident.si) and the competent authority of the Member State, where the user is established.

DE Cross Linked 2 Zähne sind Zähne aus Polymethylmethacrylat, die sehr kreuz-ver-netzt sind. Durch hochwertige Rohstoffe und das entsprechende technologische Herstellungsverfahren werden die Farb- sowie Wärme-beständigkeit der Zähne, eine große Abrasionsfestigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel und eine feste Verbindung der Zähne mit dem Prothesenmaterial gewährleistet. Cross Linked 2 Zähne bestehen aus 18 verschiedenen Formen der oberen Frontzähne, die in 3 Gruppen unterteilt sind (die ovale, quadratische und dreieckige Gruppe), aus 7 verschiedenen Formen der unteren Frontzähne und aus 6 verschiedene-denen Formen der Seitenzähne. Cross Linked 2 Zähne werden erfolgreich in Teilprothesen wie in totale Zahnprothesen eingebaut, da sie sowohl funktionell als auch ästhetisch die Zähne der Patienten ersetzen.

** Um eine bessere Verbindung zur Polymer - Basis zu erreichen, sollten die Zähne aufgetaucht und anschließend mit dental MMA (monomer) benetzt werden.*

** Bei bekannten Allergien oder Überempfindlichkeit gegen Acrylmaterialien das Produkt nicht verwenden.*

** Falls ein schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dies dem Hersteller (Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender ansässig ist, gemeldet werden.*

ES Los dientes Cross Linked 2 son dientes de polimetilmetacrilato altamente reticulados. Las materias primas de alta calidad junto con el procedimiento de producción tecnológica adecuado aseguran la estabilidad del calor y el color de los dientes, una alta resistencia a la abrasión y a los solventes y una adhesión duradera con el material de la base de la dentadura. Los dientes Cross Linked 2 consisten de 18 molduras diferentes de los dientes superiores anteriores las cuales se subdividen en 3 grupos (el grupo ovalado, cuadrado y triangular), de 7 molduras diferentes de los dientes inferiores anteriores y de 6 molduras diferentes de los dientes posteriores. Los dientes Cross Linked 2 se colocan correctamente en dentaduras parciales o totales ya que reemplazan perfectamente a los dientes de los pacientes.

* Para una mejor adhesión a los polímeros de la base de la prótesis, antes de la polimerización, repase los dientes con una fresa y luego en la zona del talón, frotelos con dental MMA (monomero).

**En caso de alergia conocida o hipersensibilidad a los materiales acrílicos, no use el producto.*

** En el caso de que se produzca algún incidente grave relacionado con el dispositivo, deberá informarse de inmediato al fabricante (Polident d.o.o.; vigilancia@polident.si) y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el usuario.*

FR Les dents Cross Linked 2 sont des dents en polyméthacrylate réticulé. Des matières premières de haute qualité et un processus technologique adéquat des dents fournissent la couleur et la stabilité thermique de la dent, la résistance à l'abrasion et aux solvants et une fixation solide des dents sur la base dentaire. Les dents Cross Linked 2 se composent de 18 formes différentes de la section inter-canine supérieure, qui sont divisées en 3 groupes (ovales, carrées, triangulaires), 7 formes différentes de la section inter-canine inférieure et 6 formes différentes de la section trans-canine. Les dents Cross Linked 2 s'intègrent naturellement dans des prothèses partielles et totales, remplaçant ainsi fonctionnellement et esthétiquement les dents du patient.

* Pour une meilleure adhésion à la résine de base des prothèses et avant polymérisation, dépolir (ou abraser) les dents. Ensuite, humidifier les dents et la selle avec du MMA dentaire (monomère).

** Ne pas utiliser le produit en cas d'allergies ou d'hypersensibilité connue(s) aux matériaux à base d'acrylique.*

* Tout incident grave survenant en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant (Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur est établi.

HR Zubi Cross Linked 2 jesu visoko zamrznjeni polimetakrilatni zubi. Načinjeni su od kvalitetnih sirovina uz primjeren tehnološki postupak kojim su dostignute sljedeće značajke: stabilnost boje i topline, visoki stupanj otpornosti na abrazije i otapala te primjerena kohezivnost zuba sa dentinom bazom. Zubi Cross Linked 2 tvori 18 različitih oblika gornjega interkanalnog sektora, razvrstanih u 3 skupine (ovalni, kvadratni i trokutni), 7 različitih oblika donjega interkanalnog i 6 različitih oblika zubanskoga sektora. Zubi Cross Linked 2 uspješno umecemo u parcijalna i totalna umjetna zubana gdje funkcionalno i estetski nadomještaju pacijentove zube.

* Radi boljeg prijanjanja zuba na zubnu bazu, prije polimerizacije izbrusite zube i premažite s dentalnim monomerom.

* Sve ozbiljne štetne događaje koji se javе vezano uz ovaj proizvod treba prijaviti proizvođaču.

(Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik poslovno registriran.

POLIDENT d.o.o. Dental Products Industry

Volčja Draga 42 Phone: +386 5 330 48 40
Si-5293 Volčja Draga E-mail: polident@polident.si
Slovenia w



www.polident.si

IT Les dents Cross Linked 2 sont des dents en polyméthacrylate réticulé. Des matières premières de haute qualité et un processus technologique adéquat des dents fournissent la couleur et la stabilité thermique de la dent, la résistance à l'abrasion et aux solvants et une fixation solide des dents sur la base dentaire. Les dents Cross Linked 2 se composent de 18 formes différentes de la section inter-canine supérieure, qui sont divisées en 3 groupes (ovales, carrées, triangulaires), 7 formes différentes de la section inter-canine inférieure et 6 formes différentes de la section transcanine. Les dents Cross Linked 2 s'intègrent naturellement dans des prothèses partielles et totales, remplaçant ainsi fonctionnellement et esthétiquement les dents du patient.

** Per un migliore legame polimerico con la resina per palati, prima del loro alloggiamento, irruvidire la superficie dei denti con una fresa, e successivamente umettarli con un monomero dentale.*

** Non usare il prodotto in caso di allergie o ipersensibilità note ai materiali acrilici.*

* In caso di gravi incidenti in relazione al dispositivo, questi devono essere riferiti al fabbricante.

(Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) e all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'utilizzatore.

PT Cross Linked 2 são dentes de polimetacrilato de metilo reticulados. As matérias-primas de alta qualidade juntamente com um procedimento tecnológico adequado de produção asseguram a cor e a estabilidade térmica dos dentes, uma resistência elevada à abrasão e solventes assim como uma adesão durável com a matéria-prima da dentadura. Os dentes Cross Linked 2 consistem em 18 moldes diferentes de dentes anteriores superiores que são subdivididos em 3 grupos (grupo oval, quadrado e triangular), de 7 moldes diferentes anteriores inferiores e de 6 moldes diferentes de dentes posteriores. Os dentes Cross Linked 2 são colocados com sucesso na dentadura parcial e total, uma vez que substituem eficientemente os dentes dos pacientes.

**Para melhor adesão ao acrílico, antes da polimerização, desgaste os dentes e em seguida, pincele-os com MMA dental no topo do colo.*

**Em caso de alergias conhecidas ou hipersensibilidade aos materiais acrílicos, não usar o produto.*

* Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante (Poli-

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante (polident d.o.o.; vigilancia@polident.si) e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador está estabelecido.

RU Cross Linked 2 – это зубы из полиметилметакрилата с высокой степенью сшивания. Высококачественное сырье и соответствующая технология производства обеспечивают цветовую и термостабильность зубов, высокую устойчивость к истиранию и воздействию растворителей, а также прочное сцепление с материалом базиса зубного протеза. Зубы Cross Linked 2 включают 18 различных форм верхних передних зубов, которые подразделяются на 3 группы (овальные, квадратные и треугольные), 7 различных форм нижних передних и 6 различных форм боковых зубов. Зубы Cross Linked 2 устанавливаются в частичные и полные протезы, успешно заменяя зубы пациентов.

* Придайте шероховатость и смочите поверхность гребня искусственного зуба жидким стоматологическим мономером для достижения лучшего сцепления с базисом зубного протеза.

* Не используйте изделие при наличии аллергии или повышенной чувствительности к акриловым материалам.

* О любом серьезном инциденте, связанном с использованием изделия, необходимо сообщить производителю (Polident d.o.o.; vigilanca@polident.si) и

компетентному органу государства – члена ЕС, где находится потребитель.

SI Zobje Cross Linked 2 so visoko zamrznjene polimetilmetakrilatni zobje. Kvalitetne surovine in ustrezne tehnološke postopke izdelave zob zagotavljata varno in toplotno stabilnost zob, veliko abrazijsko odpornost, odpornost proti toplom in trdno povezavo zob z dentalno bazo. Zobje Cross Linked 2 sestavljata 18 različnih oblik zgornjega interkanteriskega sektorja, ki so razdeljene v 3 skupine (ovalna, kvadratna, trikotna), 7 različnih oblik spodnjega interkanteriskega sektorja in 6 različnih oblik transkanteriskega sektorja. Zobje Cross Linked 2 se uspešno vgrajujejo v parcialne in totalne proteze, ker funkcionalno in estetsko nadomeščajo pacientove zobe.

**Za boljšo oprijemljivost zob na dentalno bazo je potrebno te pred tlačenjem akrilata nahrpati in premazati z dentalno monomero.*

* V primeru znanih alergij ali preobčutljivosti na akrilne materiale izdelka ne uporabljajte.

* V primeru resnih težav v zvezi z uporabo izdelka naj se to sporoči proizvajalcu (Polident d.o.o., vigilanca@polident.si) in pristojnemu organu države članice, kjer ima uporabnik sedež.

SYMBOL	EN EXPLANATION	EN Manufacturer
SYMBOL	DE Hersteller	DE Hersteller
SYMBOL	ES EXPLICACION	ES Fabricante
SYMBOL	FR EXPLICATION	FR Fabricant
SIMBOL	HR OBRAZLOŽENJE	HR Proizvođač
SIMBOL	IT SPIEGAZIONE	IT Produttore
SIMBOL	PT EXPLICAÇÃO	PT Fabricante
Символ	RU РАССЛАЖКА	RU Производитель
SIMBOL	SI RAZLAGA	SI Proizvajalec
REF	EN Catalogue number	EN Medical device
	DE Katalognummer	DE Medizinisches Gerät
	ES Número en catálogo	ES Producto sanitario
	FR Numéro de catalogue	FR Dispositif médical
	HR Kataložni broj	HR Medicinski uređaj
	IT Numero di catalogo	IT Dispositivo medico
LOT	PT Número en catálogo	PT Aparelho médico
	RU Номер по каталогу	RU Изделие медицинского назначения
	SI Kataložna številka	SI Medicinski pripomoček
Rx only	EN Batch code	EN Prescription only
	DE Batch-Code	DE Verschreibungspflichtig
	ES Código de lote	ES Solo con receta
	FR Code du lot	FR Ordonnance seulement
	HR Batch kod	HR Samo na recept
	IT Codice lotto	IT Solo su prescrizione
	PT Código de lote	PT Somente receita medica
	RU Код партии	RU Только по рецепту
	SI Šaržna koda	SI Samo na recept
	EN Use - by date	EN CE marking-with Notified body number
Shelf life	DE Haltbarkeitsdatum	DE CE-Zeichnung – mit Nummer der benannten Stelle
	ES Fecha de caducidad	ES Marcado CE - con número de organismo notificado
	FR Utiliser par date	FR Marquage CE - avec numéro d'organisme notifié
	HR Upotreba - do datuma	HR CE oznaka - s brojem prijavljenog tijela
	PT Usar até a data	PT Marcação CE número de ente notificado
	PT Use until date	PT Marcação CE com o número do corpo notificado
	RU Использовать до	RU Маркировка CE с номером уполномоченного органа
	SI Rok uporabe	SI Oznaka CE - s številko prijavljenega organa

Date: 15. 09. 2025

Date: 15.09.2025

www.polident.si

3	31	I1	T1
	32	I2, I3	T1, T2
	33	I2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I3, I4, I5	T3, T4
	36	I4, I5	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
0	01	I1	T1
	02	I1, I3	T1, T2, T3
	03	I3, I4	T3, T4
	04	I4, I5	T3, T5
	05	I5, I6	T3, T4, T5
	06	I6, I7	T5, T6
4	41	I1	T1
	42	I3, I4	T2, T3
	43	I3, I4	T3, T4
	44	I5, I6	T3, T4, T5, T6
	45	I5, I6	T4, T5



01	40,3 8,2 7,5
02	42,3 8,4 8,0
03	44,2 9,8 8,2
04	46,6 9,8 8,7
05	47,3 10,0 8,7
06	52,0 13,1 9,7




41	40,4 9,0 7,5
42	43,4 9,4 8,2
43	45,8 9,0 8,2
44	46,9 9,4 9,0
45	48,5 10,0 8,9




11	31,3 7,5 4,6
12	31,4 9,1 4,7
13	33,5 8,3 5,0
14	34,0 9,1 5,0
15	34,4 9,1 5,3
16	37,5 8,5 5,6
17	38,2 11,9 5,8

BARVE / BOJE / COLOURS / COLORI /
FARBE / COLOR / COR / ЦВЕТ / COULEUR


BL3
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4

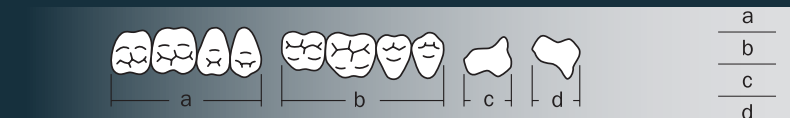

T1	28,5 30,0 8,6 7,8
T2	28,7 31,2 8,3 8,2
T3	29,2 32,1 8,7 8,7
T4	30,5 33,2 9,0 8,7
T5	31,6 33,2 8,9 8,8
T6	33,0 35,0 9,5 9,3

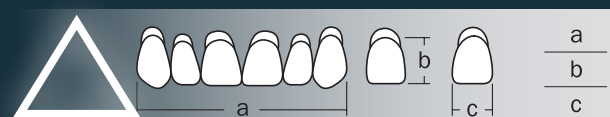

31	38,6 8,9 7,2
32	41,5 9,5 7,9
33	42,0 10,5 8,2
34	43,5 9,4 8,0
35	44,1 10,2 8,4
36	44,9 10,4 8,5
37	46,5 10,8 8,7

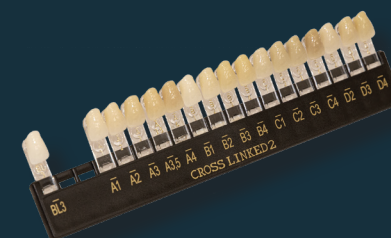

PoliDent CROSS LINKED 2