

PoliDent



Создаем улыбки с 1958

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



	О КОМПАНИИ POLIDENT	06
1.	ИСКУССТВЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЗУБЫ	09
1.1	REF-LINE	10
1.2	PRIMODENT	14
1.3	CROSS LINKED 2	15
2.	ДИСКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ CAD/CAM	17
2.1	ДИСК PMMA CAD/CAM	18
	одноцветный, многослойный	
2.2	ДИСК PINK CAD/CAM	19
	одноцветный, многослойный	
2.3	ДИСК CASTING CAD/CAM	20
2.4	ДИСК MODEL CAD/CAM	20
2.5	ДИСК X-RAY CAD/CAM	20
2.6	ДИСК ZIR-LINE	21
	Zir-Line ML HS disc	21
	Zir-Line ML disc	21
	Zir-Line ML Hybrid disc	22
	Zir-Line W disc	22
2.7	ФРЕЗЫ POLICUTTER MILLING TOOLS	23
	для дисков CAD/CAM из ПММА	23
	для дисков из диоксида циркония	23
	для дисков из диоксида циркония с алмазным покрытием	23
3.	СМОЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ	25
3.1	poli3Dent MODEL pro	26
3.2	poli3Dent CAST	26
3.3	poli3Dent CLEANER	27
4.	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ	29
4.1	АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	30
	Polihot	30
	Policold	30
	K-30 S	31
	Polirepar S	31
	Ortopoli	32
	Politemp	32
	Politray	32
	Unitray LC	33

4.2	ПЕМЗА	33
4.3	ЩЕТКИ	33
4.4	ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	34
	Polivest	34
	Politerm Speed	34
	Polipress	34
	Univecast	35
4.5	КОРУНД	35
4.6	СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ГИПСЫ	36
	Alabaster	36
	Polidur	36
	Polistone	37
	PrimaArt	37
	PrimaRock	37
4.7	СИЛИКОНЫ	37

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 38

5.1	ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ	39
	Перчатки медицинские защитные	39
	Фартук медицинский защитный	39

6. ДРУГИЕ ТОВАРЫ 40

6.1	SHELLAC BASE PLATES	41
6.2	SCULPTURING WAX SPEZIAL	41
6.3	FLEXISTONE Standard	42
6.4	FLEXISTONE Plus	42
6.5	SILAPLAST Futur	43
6.6	SILAPLAST Futur cat f - lyquid	43
6.7	SILASOFT Normal	44
6.8	CAT P UNIVERSAL Futur - paste	44
6.9	BLUE ECO	45
6.10	BLUE ECO STONE	45
	ОХВАТ РЫНКА	46

Наши процессы тщательно разработаны, строго контролируются и основаны на проверенных материалах, что обеспечивает стабильное качество продукции и полную прослеживаемость, подтвержденную соответствием Регламенту (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях, сертифицированной системой управления качеством ISO 13485, сертификацией MDR 2017/745, регистрацией и включением в реестр FDA, лицензированием медицинских изделий в Министерстве здравоохранения Канады и другими требованиями.

PoliDent



Создаем улыбки с 1958 года



www.polident.si



Искусственные полимерные зубы

- 1.1 REF - LINE
- 1.2 PRIMODENT
- 1.3 CROSS LINKED 2



Новая эра эстетического протезирования, объединяющая анатомическую точность, передовую технологию многослойности и инновационный композитный акриловый материал в одной высокоусовершенствованной линии зубов.

Вдохновлённые естественной красотой зубов и разработанные для современных специалистов в области стоматологии и зуботехники, зубы Ref-Line обеспечивают натуральную эстетику, превосходную стабильность цвета, высокую устойчивость к истиранию и надёжную интеграцию в эффективные лабораторные рабочие процессы.

Ref-Line — уникальная, универсальная и премиальная линия зубов в каждой детали.



- Многослойная линия композитных
- искусственных зубов
- Высокая эстетика
- Естественная цветопередача
- Естественный вид зубов
- Точный анатомический дизайн и форма
- Высокий уровень индивидуализации
- Простая интеграция в лабораторный рабочий процесс
- Инновационная разработка материалов
- Исключительное обеспечение качества



Автор: Ариан Дойч (Arian Deutsch), CDT. Лаборатория Deutsch Dental Arts, США



Автор: Кристиан Уибберли (Christian Wibberley) из CW Dentures в Олдеме, Англия



Спасибо, что поделились с нами своей работой!



Выглядят и ощущаются естественно

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭСТЕТИКИ, АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА, МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ЗУБНОЙ РЯД произведено и контролируется в словении, еси / разработан зубным техником для зубных техников.

Естественные цвет и форма

прозрачная резцовая область

естественная морфология

интенсивная хроматическая составляющая шеи



инцизальные микротрещины и незначительные естественные неровности
видимые мамелоны

светлый эмалевый цвет

В том числе более широкие пришеечные формы в зубных конструкциях для скрытия металлических элементов в имплантатах и частичных протезах



Мезиальная и дистальная прозрачность, выступы и трещины на режущем крае резца повторяют естественную структуру зубов, которая сохраняется даже после шлифовки.



- Скрытие фиссуральных зон на окклюзионной поверхности
- Анатомически продуманные бугорки, подобранные в индивидуальном порядке в соответствии с антагонистами, обеспечивают естественный вид и структуру зуба



REF-LINE включает 33 формы зубов:

- 16 форм верхних фронтальных зубов
- 8 форм нижних фронтальных зубов
- 9 форм боковых зубов

Доступны в оттенках BL1, BL3 и 16 оттенках согласно шкале VITA.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- Совершенство конструкции зубов
- Ретенционное отверстие в нижней части заклыковых зубов обеспечивает более простую и быструю работу

Материал Ref-Line

- Повышенная износостойкость*
- Повышенная твердость*

* В сравнении со стандартными акриловыми зубами Primodent и Cross Linked 2



Все формы в натуральную величину представлены в таблице форм REF-LINE. Для PDF-версии отсканируйте код или найдите её на нашем сайте: <https://www.polident.si/en/downloads/catalogs/>



Выглядят и ощущаются естественно

ЗУБЫ REF-LINE ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Откройте новую эру стоматологического совершенства с искусственными зубами Ref-Line! Они доказывают: безупречное сочетание инноваций и точности возможно! Эти зубы – настоящее воплощение совершенства – разработаны зубными техниками для профессионалов в сфере стоматологии по всему миру.

Выверенность и точность конструкции:

Каждая деталь зубов Ref-Line, от формы зубов до текстуры поверхности, системы внутренних слоев, оттенков, выступов на режущем крае резца, микротрещин и несовершенств, тщательно продумана – никаких компромиссов, если речь идет о качестве! Результат – зубной ряд, отражающий несравненную красоту натуральных зубов, сочетающий органические формы с передовыми цифровыми технологиями производства, отточенными производственными процессами и собственной разработкой материалов. Все это воплощено в революционном продукте.

Анатомическое совершенство:

Благодаря высокой анатомической форме, напоминающей натуральные зубы, применение физического и цифрового моделирования позволяет нам достичь идеальной гармонии между естественной эстетикой и производственной формой. Каждая деталь доведена до совершенства.

Персонализация в лучшем виде:

Наши точные системы наслоения и тонирования обеспечивают естественный внешний вид за счет насыщенных цветов пришеечной области и дентина, а также беловатой полупрозрачной эмали. Разнообразные цветовые эффекты достигаются простой шлифовкой слоя эмали. Высокая интенсивность цвета обеспечивает маскировку металлического каркаса, даже когда зуб редуцирован с небной стороны. Более темные клыки, пришеечные области, выступы на режущем крае резца и мезиальная/дистальная прозрачность являются важными факторами для создания протезов, которые выглядят невероятно естественно.

Простая интеграция:

Нижняя часть каждого зуба имеет форму, повторяющую контуры десневого гребня. Это позволяет минимизировать необходимость в значительной обработке зуба (шлифовке) при его установке. Наличие заранее сформированного пришеечного отверстия в боковых зубах **упрощает** шлифовку, что существенно экономит время. Данное отверстие предназначено для упрощения моделирования зубных протезов, опирающихся на имплантаты, а также для фиксации материалов, впрыскиваемых под давлением при изготовлении базисов зубных протезов, не содержащих полиметилметакрилата (ПММА).

Разработка инновационных материалов:

Наш передовой композитный акриловый материал превосходит стандартный акрил. Состоящие из тщательно подобранных полимеров и матрицы, усиленной неорганическими микронаполнителями, зубы Ref-Line обладают повышенной устойчивостью к механическому износу, повышенной твердостью, устойчивостью к образованию зубного налета, стабильностью цвета, отличной полируемостью и превосходной адгезией к материалам для изготовления базисов зубных протезов.

Исключительный контроль качества:

Благодаря нашей технологии непрерывного инжекционного литья плотность материала превосходит показатели традиционных методов, обеспечивая отсутствие пористости, усадки и излишков материала. Это гарантирует постоянную повторяемость и стабильность размеров, что является критически важным фактором при цифровом проектировании зубных протезов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Естественный вид: достигается благодаря сочетанию точной анатомической конструкции и передовой технологии наслоения материалов.

Высокая стабильность цвета: наш композитный материал обеспечивает яркие, стойкие цвета.

Отсутствие трещин: силанизированные композитные частицы, химически связанные с акриловой матрицей, предотвращают растрескивание.

Выбирайте зубы Ref-Line, чтобы обеспечить стоматологическое обслуживание, идеально сочетающее инновации, эстетику и долговечность. Выведите свою практику на новый уровень, следуя за будущим стоматологического совершенства.



PRIMODENT

для красивой улыбки



Primodent — проверенная универсальная линия искусственных зубов, объединяющая естественную эстетику, функциональную надёжность и долговечные свойства материала. Высокая устойчивость к истиранию, стабильность цвета и термостойкость обеспечивают стабильные результаты при различных ортопедических показаниях. Простота обработки и надёжность в повседневной работе делают Primodent практичным и выгодным выбором для специалистов в области стоматологии и зуботехники.


- Высокоэстетичные трёхслойные акриловые зубы
- Отличные механические свойства
- Высокая устойчивость к истиранию
- Стабильность цвета
- Термостойкость
- Простота в работе
- Доступны в двух шкалах оттенков



PRIMODENT включает 45 форм зубов:

- 27 форм верхних фронтальных зубов (овальная, квадратная и треугольная группы)
- 10 форм нижних фронтальных зубов
- 8 форм боковых зубов

Доступны в 19 оттенках Primodent и 17 оттенках Primodent-V.

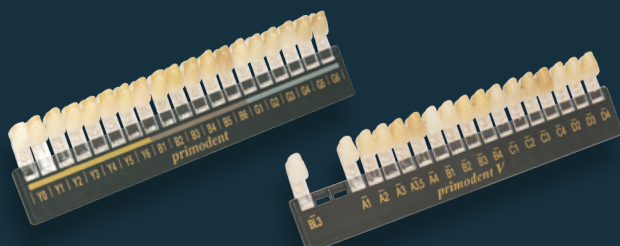

Все модели в натуральную величину можно найти в таблице моделей PRIMODENT. Чтобы открыть PDF-версию, отсканируйте QR-код или найдите ее на нашем сайте: <https://www.polident.si/en/downloads/catalogs/>

CROSS LINKED 2

сохраняй улыбку



CROSS LINKED 2 — это проверенное качество материала, естественная эстетика и надёжность в ежедневной зуботехнической работе, объединённые в стандартной, но высококачественной двухслойной линии акриловых искусственных зубов. Натуральный внешний вид, стабильность цвета, термостойкость и высокая устойчивость к истиранию обеспечивают предсказуемые, долговечные результаты и оптимальное соотношение качества и ценности.

- Высококачественные двухслойные акриловые зубы
- Высокая устойчивость к истиранию
- Стабильность цвета
- Термостойкость
- Простота в работе



CROSS LINKED 2 включает 31 форму зубов:


18 форм верхних фронтальных зубов

/ овальная, квадратная и треугольная группы /

7 форм нижних фронтальных зубов

6 форм боковых зубов

Доступны в 17 оттенках.

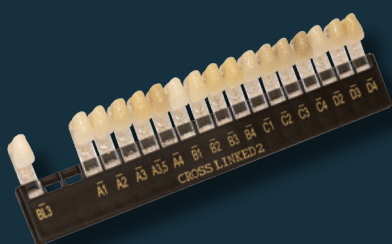

Все модели в натуральную величину можно найти в таблице моделей CROSS LINKED 2. Чтобы открыть PDF-версию, отсканируйте QR-код или найдите ее на нашем сайте: <https://www.polident.si/en/downloads/catalogs/>

PoliDent



PoliDent



Создаем улыбки с 1958 года



www.polident.si

- 2.1 **ДИСК PMMA CAD/CAM**
 - одноцветный, многослойный
- 2.2 **ДИСК PINK CAD/CAM**
 - одноцветный, многослойный
- 2.3 **ДИСК CASTING CAD/CAM**
- 2.4 **ДИСК MODEL CAD/CAM**
- 2.5 **ДИСК X-RAY CAD/CAM**
- 2.6 **ДИСК ZIR-LINE**
 - Zir-Line ML HS disc
 - Zir-Line ML disc
 - Zir-Line ML Hybrid disc
 - Zir-Line W disc
- 2.7 **ФРЕЗЫ POLICUTTER MILLING TOOLS**
 - для дисков CAD/CAM из ПММА
 - для дисков из диоксида циркония
 - для дисков из диоксида циркония с алмазным покрытием

PoliDent PMMA CAD/CAM disc

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСКОВЫЙ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ПММА ДЛЯ CAD/CAM-СИСТЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВА НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ИЛИ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ ZrO₂;
- ФРЕЗЕРОВАНИЯ СЪЕМНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ ШИНЫ И
- ФРЕЗЕРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ, ПОЛНЫХ ЗУБНЫХ РЯДОВ И ЗУБНЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ.

ПРОЗРАЧНЫЕ ДИСКИ ПОДХОДЯТ ТАКЖЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ МЕТОДОМ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ (МЕТАЛЛ, ПРЕССОВАННАЯ КЕРАМИКА) В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ.

• ОДНОЦВЕТНЫЙ



• МНОГОСЛОЙНЫЙ

Многослойный PMMA CAD/CAM-диск PoliDent включает несколько слоёв с плавными переходами оттенков, разработанных для имитации естественного цветового градиента натуральных зубов. Такое многослойное строение позволяет получать высокоэстетичные и экономичные протетические реставрации.



* Зарегистрировано в США в соответствии с назначением:
— для фрезерования долгосрочных временных коронок и мостов, а также для фрезерования и проверки устройства на гипсовой модели или в ротовой полости перед окончательным фрезерованием ZrO₂ и
— фрезерования отдельных зубов для зубных протезов, полных зубных рядов и зубных сегментов для изготовления зубных протезов.

* Лицензировано Министерством здравоохранения Канады в соответствии с назначением:
— для фрезерования краткосрочных временных коронок и мостов, а также для фрезерования и проверки устройства на гипсовой модели или в ротовой полости перед окончательным фрезерованием ZrO₂.

	Спецификация	Типичное среднее значение	Метод согласно
Прочность при изгибе	> 65 MPA // > 50 MPA	90 MPA // 120 MPA	EN ISO 20795-2 // EN ISO 10477
Модуль упругости при изгибе	> 2000 MPA	2700 MPA	EN ISO 20795-2
Сорбция	< 32 MG/MM ³	25 MG/MM ³	EN ISO 20795-2
Растворимость	< 1,6 MG/MM ³	0,6 MG/MM ³	EN ISO 20795-2
Остаточный мономер	< 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1 / EN ISO 20795-2
Твердость по Виккерсу	> 24 HV	26 HV	/

ЦВЕТА

BL1 – BL2 – BL3 – A1 – A2 – A3 – A3,5 – B1 – B2 – B3 – C2 – D2

ЦВЕТА ЭМАЛИ: E1 – E2

CLEAR - BERRY - BLUE - GREEN - ORANGE

ПРОЗРАЧНЫЙ – ЯГОДНЫЙ – ГОЛУБОЙ – ЗЕЛЕНый – ОРАНЖЕВый

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА:

12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35 мм

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЗУБНЫХ ОТТЕНКОВ ДЛЯ ЭСТЕТИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК, МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ И ФРЕЗЕРОВАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ML-ДИСКА:

- ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ Тёмного ПРИШЕЕЧНОГО ОТТЕНКА К СВЕТЛОМУ ЭМАЛЕВОМУ ОТТЕНКУ.
- Плавный ЦВЕТОВОЙ ГРАДИЕНТ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧёт ПЯТИСЛОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАШИВАНИЯ.
- РЕЗУЛЬТАТ — ЕСТЕСТВЕННАЯ И ВЫСОКОЭСТЕТИЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
- БОЛЕЕ НАТУРАЛЬНАЯ ТРАНСЛЮЦЕНТНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ.
- НАдёЖНАЯ АДГЕЗИЯ К БАЗИСНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПРОТЕЗОВ И ДРУГИМ РММА-МАТЕРИАЛАМ.

ЦВЕТА

BL2 - BL3 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА

15, 16, 18, 20 мм

СЛОИСТОСТЬ

	1 светлый слой	} 8,5 мм
	2-4 три переходных слоя	
	5 темный слой	6,5 мм (диск 15 мм) 7,5 мм (диск 16 мм) 9,5 мм (диск 18 мм) 11,5 мм (диск 20 мм)

PoliDent

PINK CAD/CAM disc

НАЗНАЧЕНИЕ

PINK CAD/CAM-ДИСК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПОЛНЫХ И ЧАСТИЧНЫХ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ;
- ФРЕЗЕРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОТЕЗОВ С НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ НА ИМПЛАНТАТАХ.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ТИПИЧНОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД СОГЛАСНО
Прочность при изгибе	> 65 МПа	90 МПа	EN ISO 20795-1
Модуль упругости при изгибе	> 2000 МПа	2700 МПа	EN ISO 20795-1
Сорбция	< 32 µg/mm³	25 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Растворимость	< 1,6 µg/mm³	0,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
Остаточный мономер	< 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1

• ОДНОЦВЕТНЫЙ

ЦВЕТА

pink (розовый), pink veined (розовый с прожилками)

ФОРМЫ


SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА

20, 25, 27, 30, 35, 40 мм

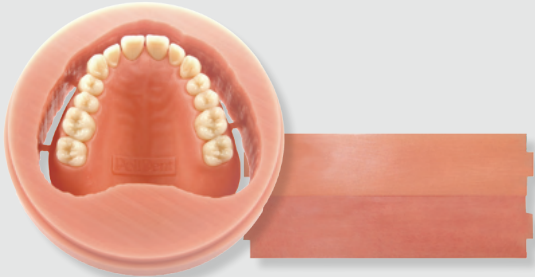

• МНОГОСЛОЙНЫЙ

ЦВЕТА / ТОЛЩИНА

G71	20 мм
pink ML (розовый ML)	25, 30 мм
G74	20, 25, 30 мм

ФОРМЫ


SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм


AG – диаметр 100 мм

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ С БОЛЕЕ НАТУРАЛЬНЫМ ВИДОМ.

Многослойный PINK CAD/CAM-диск PoliDent с несколькими пигментированными слоями и плавными цветовыми переходами имитирует естественный цветовой градиент десны. Он обеспечивает изготовление базисов протезов с натуральной эстетикой и предлагает эффективное, экономичное и высокоэстетичное решение для цифровой протетики.

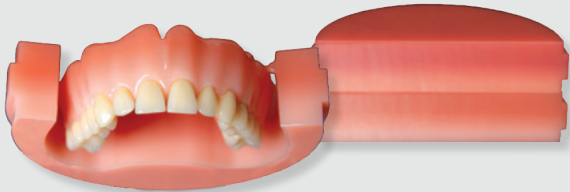


СЛОИСТОСТЬ PINK ML (розовый ML) 25, 30 мм

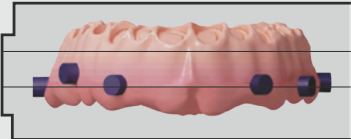

1	светлый слой	} 18,5 мм
2-6	пять переходных слоев	
7	темный слой	
		6,5 мм (диск 25 мм) / 11,5 мм (диск 30 мм)

СЛОИСТОСТЬ G71 20 мм / G74 20, 25, 30 мм

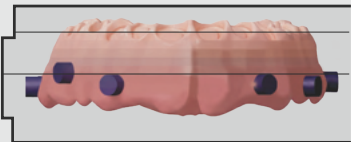

1	светлый слой	} 11,5 мм
2-6	пять переходных слоев	
7	темный слой	
		8,5 мм (диск 20 мм) / 13,5 мм (диск 25 мм) / 18,5 мм (диск 30 мм)

PoliDent CASTING CAD/CAM disc

НАЗНАЧЕНИЕ

ЛИТЕЙНЫЙ ДИСК CAD/CAM ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

- ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАРКАСОВ ДЛЯ ЛИТЬЯ
- ФРЕЗЕРОВАНИЕ КОРОНОК, МОСТОВ И ЛИТЬЕВЫХ СЛОЕВ ДЛЯ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ
- А ТАКЖЕ ПРОВЕРКА КАРКАСОВ НА ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ ZrO_2 (ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ КРУПНЫХ КАРКАСОВ ИЗ ZrO_2).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ 100 % ОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ СГОРАЕТ БЕЗ ОСТАТКА.

ЦВЕТА

CLEAR (ПРОЗРАЧНЫЙ)

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА

12, 15, 18, 20, 25, 30 мм

PoliDent MODEL CAD/CAM disc

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСК MODEL CAD/CAM ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КУЛЬТЕВЫХ ВКЛАДOK / ШТАМПОВ, РАБОЧИХ МОДЕЛЕЙ И АНТАГОНИСТОВ. Цифровые модели создаются в САПР на основе 3D-данных, полученных с помощью широкого спектра решений для снятия цифровых оттисков.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СИЛЬНО СПРЕССОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
- МАТЕРИАЛ НЕ ВПИТЫВАЕТ ЖИДКОСТИ - РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИКИ
- ОТЛИЧНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СВОЙСТВА
- ДОСТУПЕН В ДВУХ ВАРИАНТАХ ПЛОТНОСТИ

ЦВЕТА

BROWN (КОРИЧНЕВЫЙ), BEIGE (БЕЖЕВЫЙ)

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА

25 мм



PoliDent X-RAY CAD/CAM disc

НАЗНАЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИСК ДЛЯ CAD/CAM-СИСТЕМ — ЭТО ДИСК, ВИДИМЫЙ В РЕНТГЕНОВСКОМ ДИАПАЗОНЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ:

- ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СТЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

ПОЗВОЛЯЕТ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ЗУБОВ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ) ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА ИМПЛАНТАЦИИ.

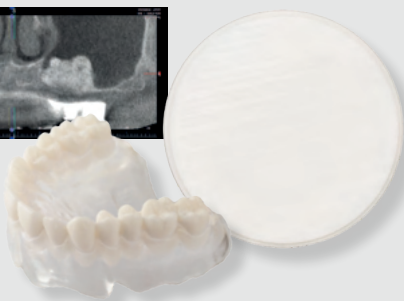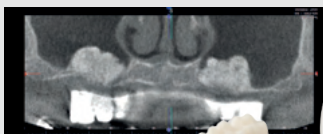

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СОДЕРЖИТ ВИДИМЫЙ ПОД РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ ПОРОШОК
- ОДНОРОДНАЯ СМЕСЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШУЮ ВИДИМОСТЬ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАССЕИВАНИЕ СВЕТА

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ZZ – диаметр 95 мм

AG – диаметр 100 мм

ТОЛЩИНА

12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 мм

ZIR-LINE ML HS disc

Диск ZIR-Line ML HS подходит для эстетичных реставраций любого количества зубных единиц. Материал представляет собой оптимальное сочетание эстетики и долговечности. Встроенный цветовой градиент позволяет эффективно создавать реставрации с естественным внешним видом.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСК ZIR-LINE ML HS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

виниров, вкладок, накладок, анатомически редуцированных коронок, полноанатомических (монокоронных) коронок на передние зубы, полноанатомических (монокоронных) коронок на задние зубы, первичных телескопических коронок, анатомически редуцированных мостов (до 3 зубных единиц), анатомически редуцированных мостов (до 14 зубных единиц), полноанатомических (монокоронных) мостов (до 3 зубных единиц), полноанатомических (монокоронных) мостов (до 14 зубных единиц) и гибридных абатментных коронок.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

тип: многослойный

материал: 4y-tzр

прочность: 1200 ± 1500 мпа

исключительно высокая стойкость к появлению трещин

резцовый и дентинный слои + 2 переходных слоя = естественный цветовой градиент

идеально подходит для полноанатомических (монокоронных) коронок и мостов, а также для обтачивания (в один слой)

ЦВЕТА

BL

A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4

B1 – B2 – B3 – B4

C1 – C2 – C3 – C4

D2 – D3 – D4

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ТОЛЩИНА

14, 18, 22 мм


ZIR-LINE ML disc

МНОГОСЛОЙНЫЙ ДИСК ZIR-LINE предназначен для создания высокоэстетичных реставраций до трех секций. Он представляет собой идеальный баланс высокой светопрозрачности благодаря увеличенной доле кубической фазы в смешанной кубически-тетрагональной структуре и стабильных механических характеристик. Встроенный цветовой градиент позволяет эффективно создавать реставрации с естественным внешним видом.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСК ZIR-LINE ML ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

виниров, вкладок, накладок, анатомически редуцированных коронок, полноанатомических (монокоронных) коронок на передние зубы, полноанатомических (монокоронных) коронок на задние зубы, анатомически редуцированных мостов (до 3 зубных единиц), полноанатомических (монокоронных) мостов (до 3 зубных единиц) и гибридных абатментных коронок.

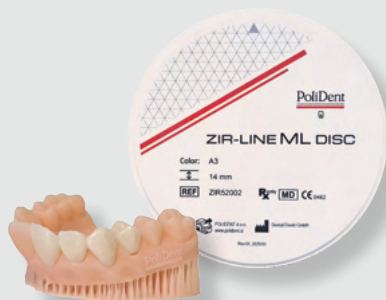

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: многослойный

МАТЕРИАЛ: 5Y-TZP

Прочность: 700 ± 1000 МПа

Более надежный по сравнению с дисиликатом лития при схожем уровне эстетики

Наш фаворит для реставрации переднего зубного ряда

Резцовый и дентинный слои + 2 переходных слоя = естественный цветовой градиент

Эстетичная финишная отделка при минимальных усилиях

ЦВЕТА

BL

A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4

B1 – B2 – B3 – B4

C1 – C2 – C3 – C4

D2 – D3 – D4

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ТОЛЩИНА

14, 18, 22 мм

ZIR-LINE ML Hybrid disc

ГИБРИДНЫЙ ДИСК ZIR-LINE ML подходит для изготовления высокоэстетичных реставраций большого объема. Различная степень прозрачности и прочности на изгиб от пришеечной до резцовой части обеспечивает сбалансированное сочетание эстетики и надежности. Гибридный слой из эстетической линии «теплый желтый» выполнен в технике точного послойного нанесения и идеально вписывается в зубной ряд.

16 цветов и три степени отбеливания по цветовой шкале Vita охватывают наиболее распространенные оттенки зубов, обеспечивая соответствие самым высоким требованиям в области эстетики.

НАЗНАЧЕНИЕ

ГИБРИДНЫЙ ДИСК ZIR-LINE ML идеально подходит для:

выполнения любых задач: от монолитных одиночных коронок до сложных супраконструкций для реставрации передних и задних зубов.



Спецификация

Тип: гибридный слой

МАТЕРИАЛ: 5Y-TZP + 3Y-TZP

Прочность: > 800 МПа в области резцов, 1050 ± 1500 МПа в области тела / Высокая надежность процесса

Исключительная точность благодаря использованию материалов с высокой устойчивостью к деформациям

Оптимальное решение для быстрого и экономичного изготовления естественных, полноанатомических (монолитных) реставраций

ЦВЕТА

BL1 – BL2 – BL3

A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4

B1 – B2 – B3 – B4

C1 – C2 – C3 – C4

D2 – D3 – D4

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ТОЛЩИНА

16, 20, 25 мм

ZIR-LINE W disc

ДИСК ZIR-LINE W подходит для эстетичных реставраций любого количества зубных единиц.

«Классический» материал второго поколения обладает хорошими механическими свойствами и высокой светопрозрачностью.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДИСК ZIR-LINE W ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

ВСЕХ ВИДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, МОСТОВ С МАКСИМУМ ДВУМЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ КОРОНКАМИ.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: II

МАТЕРИАЛ: 3Y-TZP-LA

Прочность: 1150 ± 1500 МПа

Высокая прочность

Высокая стойкость к появлению трещин

Идеально подходит для высокоэстетичного винирования и обтачивания (в один слой)

Физические свойства

ЦВЕТА

WHITE (БЕЛЫЙ)

ФОРМЫ

SHOULDER (Плечо) – диаметр 98,5 мм

ТОЛЩИНА

10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 мм

PoliDent

POLICUTTER MILLING TOOLS

ФРЕЗЫ POLICUTTER - С ЧЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: ДИСКИ PMMA

	арт. №	диаметр головки, мм	диаметр хвостовика, мм	общая длина, мм	с чем используются:
AMANN GIRRBACH	15724	1.0	3.0	47	PMMA
	15725	2.5	3.0	47	PMMA
	15726	0.6	3.0	47	PMMA
IMES ICORE	15727	1.0	3.0	48	PMMA
	15728	2.5	3.0	48	PMMA
	15729	0.6	3.0	48	PMMA
VHF	15730	1.0	3.0	35	PMMA
	15731	2.0	3.0	35	PMMA
	15732	0.6	3.0	35	PMMA
ZIRKONZAHN	15733	1.0	3.0	50	PMMA
	15734	2.0	3.0	50	PMMA
	15735	0.5	3.0	50	PMMA
ROLAND	15744	2.0	4.0	50	PMMA
	15745	1.0	4.0	50	PMMA
	15746	0.6	4.0	50	PMMA



ФРЕЗЫ POLICUTTER - С ЧЕМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ

	арт. №	диаметр головки, мм	диаметр хвостовика, мм	общая длина, мм	с чем используются:
AMANN GIRRBACH	15700	1.0	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15701	2.5	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15702	0.6	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
IMES ICORE	15703	1.0	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15704	2.5	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15705	0.6	3.0	48	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
VHF	15706	1.0	3.0	35	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15707	2.0	3.0	35	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15708	0.6	3.0	35	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
ZIRKONZAHN	15709	1.0	3.0	57	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15710	2.0	3.0	57	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15711	0.5	3.0	57	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
ROLAND	15736	2.0	4.0	50	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15737	1.0	4.0	50	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15738	0.6	4.0	50	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ
	15739	0.3	4.0	50	ЦИРКОНИЕВЫЕ ДИСКИ



ФРЕЗЫ POLICUTTER - ДЛЯ ЦИРКОНИЕВЫХ ДИСКОВ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ


	арт. №	диаметр головки, мм	диаметр хвостовика, мм	общая длина, мм	с чем используются:
AMANN GIRRBACH	15712	1.0	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15713	2.5	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15714	0.6	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
IMES ICORE	15715	1.0	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15716	2.5	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15717	0.6	3.0	48	циркониевые диски с алмазным покрытием
VHF	15718	1.0	3.0	40	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15719	2.0	3.0	40	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15720	0.6	3.0	40	циркониевые диски с алмазным покрытием
ZIRKONZAHN	15721	1.0	3.0	57	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15722	2.0	3.0	57	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15723	0.5	3.0	57	циркониевые диски с алмазным покрытием
ROLAND	15740	2.0	4.0	50	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15741	1.0	4.0	50	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15742	0,6	4.0	50	циркониевые диски с алмазным покрытием
	15743	0,3	4.0	50	циркониевые диски с алмазным покрытием



PoliDent



Создаем улыбки с 1958 года

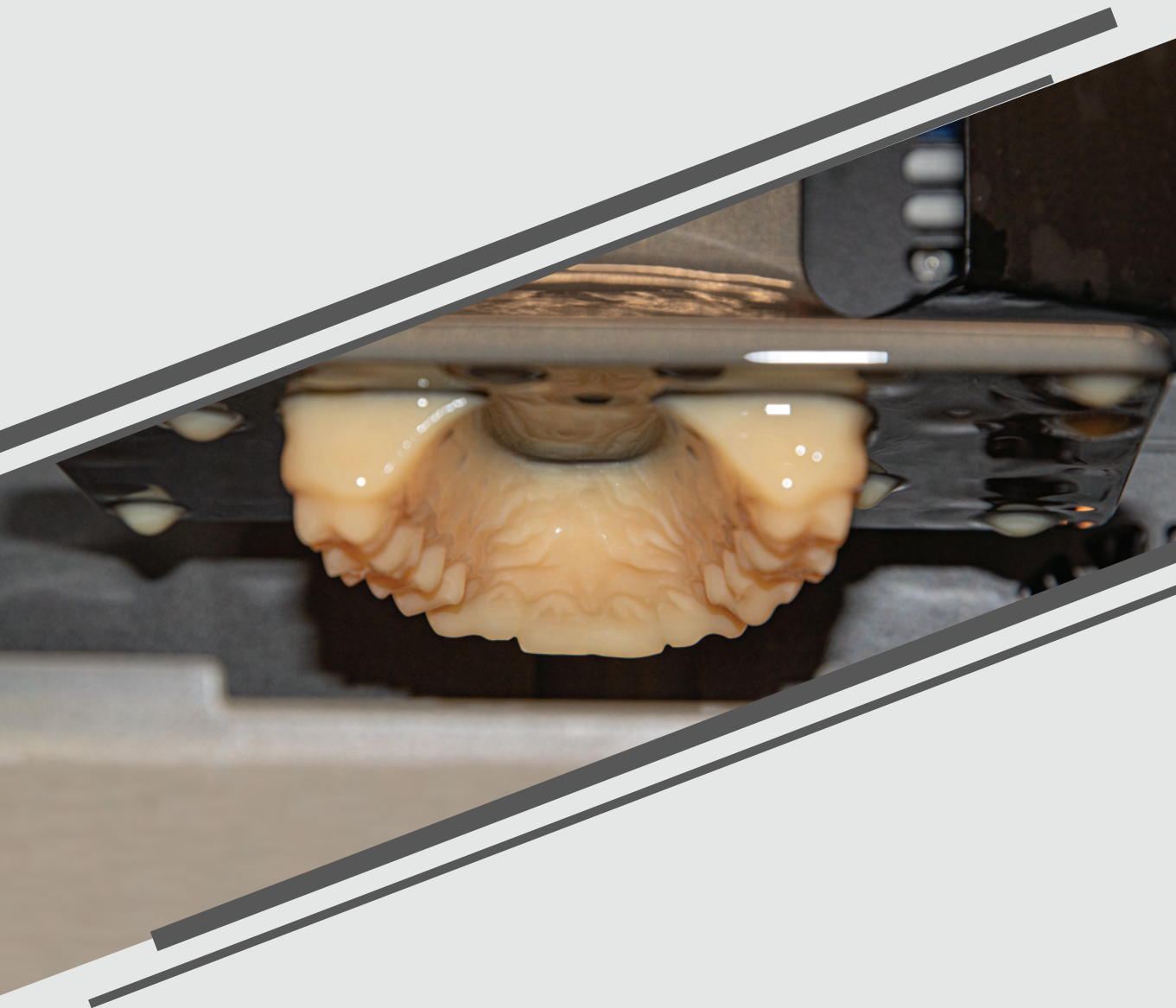

www.polident.si



Смола для 3D-печати

3.1 poli3Dent MODEL pro

3.2 poli3Dent CAST

3.3 poli3Dent CLEANER

poli3Dent MODEL pro

Poli3Dent MODEL pro обеспечивает идеальный баланс точности и простоты. Низковязкая смола обеспечивает превосходную детализацию, быструю обработку и обладает нежным запахом – для стабильных результатов и профессионального качества при каждой печати.

НАЗНАЧЕНИЕ

POLI3DENT MODEL PRO – светополимеризующаяся техническая смола на основе метакрилата для аддитивного изготовления всех типов стоматологических моделей: рабочих, учебных и демонстрационных, включая модели для термоформируемых аппаратов. Смола предназначена для профессионального использования. Наиболее подходящая для 3D-принтеров DLP.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Незначительный запах
- Относительно низкая вязкость жидкости
- Высокая точность размеров деталей, напечатанных на 3D-принтере
- Выгодное соотношение цены и качества

ЦВЕТА

PEACH (персиковый)

УПАКОВКА

08201 жидкость, 1 кг

Poli3Dent CAST

Материал для 3D-печати Poli3Dent CAST — это высокоточная смола для изготовления выжигаемых объектов. Оцените преимущества быстрого выжигания без остатка золы, низкой вязкости и исключительной стабильности материала. Тёмно-синий цвет позволяет распознавать мельчайшие детали напечатанных объектов. Poli3Dent CAST проверен с формовочным материалом UniveCAST, что обеспечивает надёжность и воспроизводимость процесса литья.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светоотверждаемая смола на основе (мет)акрилатов для аддитивного производства (3D-печати) выжигаемых объектов без остатка для процесса литья. Совместима с ASIGA MAX UV 385.

При формовании напечатанных деталей с использованием формовочного материала UniveCAST процесс обеспечивает исключительную точность, стабильность и воспроизводимость. Эта валидированная система материалов снижает риск ошибок и гарантирует надёжные результаты.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое выжигание
- Высокая точность размеров
- Полное выжигание (без остатка золы)
- Низкая вязкость — эффективная очистка напечатанных объектов
- Точное воспроизведение мелких деталей
- Высокая стабильность материала — отсутствие риска осаждения
- Валидированная совместимость с формовочным материалом UNIVECAST
- Модернизированный рабочий процесс — отсутствие ручного моделирования воска

МАТЕРИАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОЕ ВЫЖИГАНИЕ И ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твёрдость по Шору (D): > 85

ЦВЕТА

BLUE (синий)

УПАКОВКА

P3DC-PB1 жидкость, 1 кг

poli3Dent CLEANER

Чистящее средство практически не имеет запаха. Использование концентрата позволяет снизить затраты на транспортировку и хранение. Средство изготовлено не на основе спирта, поэтому не требует специальных условий хранения. Не воспламеняется и не раздражает кожу.

НАЗНАЧЕНИЕ

POLI3DENT CLEANER – КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СМОЛЯНЫХ ОТПЕЧАТКОВ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЕ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- МАСЛЯНИСТАЯ ЖИДКОСТЬ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЛЕТУЧЕСТЬЮ И СЛАБЫМ ЗАПАХОМ
- ВЫСОКАЯ АФФИННОСТЬ К СМОЛАМ НА ОСНОВЕ (МЕТ)АКРИЛАТА
- СООТНОШЕНИЕ
(1 часть POLI3DENT CLEANER к 4 частям воды)

ЦВЕТА

TRANSPARENT (ПРОЗРАЧНЫЙ)

УПАКОВКА

08202 жидкость, 1 кг



PoliDent



Создаем улыбки с 1958 года



www.polident.si

4.

Лабораторные материалы

4.1 АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

poliHOT

poliCOLD

K-30 S

poliREPAR S

ORTOpoli

poliTEMP

poliTRAY

uniTRAY LC

4.2 ПЕМЗА

4.3 ЩЕТКИ

4.4 ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

poliVEST

poliTERM SPEED

poliPRESS

univeCAST

4.5 КОРУНД

4.6 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ГИПСЫ

ALABASTER

poliDUR

poliSTONE

primaART

primaROCK

4.7 СИЛИКОНЫ

poliHOT

НАЗНАЧЕНИЕ

POLiHOT — АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ГОРЯЧЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ И ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ МЕТОДОМ ПАКОВКИ И ПРЕССОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ГОРЯЧЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
- КОРОТКАЯ ТЕСТООБРАЗНАЯ ФАЗА, БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА

ЦВЕТА

PINK — РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK)
PINK V — РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PV)
PALE PINK — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26)
PALE PINK V — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26 V)

УПАКОВКА

02866 POLiHOT, порошок, розовый	700 г
02876 POLiHOT, порошок, розовый V	700 г
03064 POLiHOT, порошок, светло-розовый	700 г
03065 POLiHOT, порошок, светло-розовый V	700 г
02867 POLiHOT, жидкость	500 мл

* ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШИХ ПАРТИЙ ВОЗМОЖНА ДРУГАЯ ФАСОВКА ПО СОГЛАСОВАНИЮ.



poliCOLD

НАЗНАЧЕНИЕ

POLiCOLD — АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕМОНТА И ПЕРЕБАЗИРОВКИ АКРИЛОВЫХ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
- ЦВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ МАТЕРИАЛУ POLiHOT

ЦВЕТА

PINK — РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK)
PINK V — РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PV)
PALE PINK — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26)
PALE PINK V — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26 V)

УПАКОВКА

02868 POLiCOLD, порошок, розовый	700 г
02879 POLiCOLD, порошок, розовый V	700 г
03135 POLiCOLD, порошок, светло-розовый	700 г
03134 POLiCOLD, порошок, светло-розовый V	700 г
02869 POLiCOLD, жидкость	500 мл

02875 Комплект:	
POLiCOLD, порошок, розовый	200 г
POLiCOLD, жидкость	150 мл

02885 Комплект:	
POLiCOLD, порошок, розовый V	200 г
POLiCOLD, жидкость	150 мл

03138 Комплект:	
POLiCOLD, порошок, светло-розовый	200 г
POLiCOLD, жидкость	150 мл

03139 Комплект:	
POLiCOLD, порошок, светло-розовый V	200 г
POLiCOLD, жидкость	150 мл

* ПРИ ЗАКАЗЕ БОЛЬШИХ ПАРТИЙ ВОЗМОЖНА ДРУГАЯ ФАСОВКА ПО СОГЛАСОВАНИЮ.

K-30 S

НАЗНАЧЕНИЕ

K-30 S —акриловая пластмасса горячей полимеризации для изготовления полных и частичных съёмных зубных протезов методом паковки и прессования с последующей традиционной термической полимеризацией.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Акриловая пластмасса горячей полимеризации
- Длительное рабочее время, подходит для одновременного изготовления нескольких протезов

ЦВЕТА

ORANGE PINK — ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK)
ORANGE PINK V — ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK VEINED)
PINK — РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PN)
PINK V — РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PN VEINED)
PALE PINK — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26)
PALE PINK V — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26V)
HOT PINK — ЯРКО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M41)

УПАКОВКА

02706 K-30 S, порошок, ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ	700 г
02719 K-30 S, порошок, ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ V	700 г
02721 K-30 S, порошок, РОЗОВЫЙ	700 г
02722 K-30 S, порошок, РОЗОВЫЙ V	700 г
02736 K-30 S, порошок, СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	700 г
02734 K-30 S, порошок, СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	700 г
02756 K-30 S, порошок, ЯРКО-РОЗОВЫЙ	700 г
02707 K-30 S, жидкость	500 мл

* При заказе больших партий возможна другая фасовка по согласованию.



poliREPAR S

НАЗНАЧЕНИЕ

POLIREPAR S — акриловая пластмасса холодной полимеризации для ремонта съёмных зубных протезов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Акриловая пластмасса холодной полимеризации
- Цвет соответствует материалу K-30 S

ЦВЕТА

ORANGE PINK — ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK)
ORANGE PINK V — ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PINK VEINED)
PINK — РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PN)
PINK V — РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: PN VEINED)
PALE PINK — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26)
PALE PINK V — СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M26V)
HOT PINK — ЯРКО-РОЗОВЫЙ	(СТАРОЕ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА: M41)

УПАКОВКА

02948 POLIREPAR S, порошок, ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ	200 г
03131 POLIREPAR S, порошок, ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ V	200 г
03094 POLIREPAR S, порошок, РОЗОВЫЙ	200 г
03095 POLIREPAR S, порошок, РОЗОВЫЙ V	200 г
03132 POLIREPAR S, порошок, СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ	200 г
03141 POLIREPAR S, порошок, СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ V	200 г
03128 POLIREPAR S, порошок, ЯРКО-РОЗОВЫЙ	200 г
02716 POLIREPAR S, жидкость	150 мл

* Для больших заказов можем организовать упаковку в другом количестве.

ORTOpoli

НАЗНАЧЕНИЕ

ORTOPOLI — АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ РАСПЫЛИЕНИЕМ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкий выбор базовых цветов
- Не содержит кадмия, поэтому нетоксичен
- Техника нанесения распылением и холодного отверждения
- Быстрое смешивание порошка с жидкостью, благодаря чему материал не растекается по модели

ЦВЕТА

RED (КРАСНЫЙ), YELLOW (ЖЕЛТЫЙ), BLUE (ГОЛУБОЙ), COLOURLESS (БЕСЦВЕТНЫЙ), FL. YELLOW (ФЛ. ЖЕЛТЫЙ), ORANGE (ОРАНЖЕВЫЙ), INDIGO BLUE (СИНИЙ ИНДИГО), GREEN (ЗЕЛЕНый), PINK (РОЗОВЫЙ)

УПАКОВКА

- 02872 Порошок, БЕСЦВЕТНЫЙ — 700 г, ШЕЙКЕР
- 02873 Жидкость, КРАСНЫЙ — 500 мл
- 02882 Жидкость, ЖЕЛТЫЙ — 500 мл
- 02883 Жидкость, ГОЛУБОЙ — 500 мл
- 02884 Жидкость, БЕСЦВЕТНЫЙ — 500 мл
- 02979 Жидкость, ФЛ. ЖЕЛТЫЙ — 150 мл
- 02980 Жидкость, ОРАНЖЕВЫЙ — 150 мл
- 02981 Жидкость, СИНИЙ ИНДИГО — 150 мл
- 02982 Жидкость, ЗЕЛЕНый — 150 мл
- 02983 Жидкость, РОЗОВЫЙ — 150 мл

* Для больших заказов можем организовать упаковку в другом количестве.

poliTEMP

НАЗНАЧЕНИЕ

POLITEMP — АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая точность и, как следствие, лучшее прилегание коронки в пришеечной области культи
- Глянцевая поверхность и минимальное накопление зубного налёта благодаря непористой структуре готового изделия
- Высокая устойчивость к абразивному износу
- Простая коррекция
- Нетоксичный материал
- Холодная полимеризация

ЦВЕТА A1-A2-A3-A3,5-B3-C2-D3-INCISAL (РЕЖУЩИЙ КРАЙ)

УПАКОВКА

- 02904 Порошок, A1 — 80 г
- 02949 Порошок, A2 — 80 г
- 02888 Порошок, A3 — 80 г
- 02889 Порошок, A3,5 — 80 г
- 02890 Порошок, B3 — 80 г
- 02891 Порошок, C2 — 80 г
- 02892 Порошок, D3 — 80 г
- 02893 Порошок, РЕЖУЩИЙ КРАЙ — 80 г
- 02894 Жидкость — 150 мл

poliTRAY

НАЗНАЧЕНИЕ

POLITRAY — АКРИЛОВАЯ ПЛАСТМАССА ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛЕПОЧНЫХ ЛОЖЕК.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрая полимеризация
- Микропористая поверхность способствует надёжному удержанию слепочного материала
- Холодная полимеризация

ЦВЕТА BLUE (ГОЛУБОЙ)

УПАКОВКА

- 02870 POLITRAY (ПОРОШОК) — 700 г
- 02871 POLITRAY (ЖИДКОСТЬ) — 500 мл

* Для больших заказов можем организовать упаковку в другом количестве.

uniTRAY LC

НАЗНАЧЕНИЕ

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ В ВИДЕ ГОТОВЫХ БАЗИСНЫХ ПЛАСТИН (ВЕРХН.) ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТИСКНЫХ ЛОЖЕК И ПРИКУСНЫХ ВАЛИКОВ. ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ МОЖНО ОТВЕРЖДАТЬ ВО ВСЕХ УСТАНОВКАХ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ И ГАЛОГЕННОЙ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
- ЖЁСТКИЙ ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
- МОЖЕТ ПОЛИМЕРИЗОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И ГАЛОГЕННЫХ СВЕТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ АППАРАТАХ
- ПОМЕСТИТЕ ЛОЖКУ ВМЕСТЕ С МОДЕЛЬЮ В СВЕТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЙ АППАРАТ НА 6–10 МИНУТ

ЦВЕТА

PINK (РОЗОВЫЙ)

УПАКОВКА

15000 UniTRAY LC – КОРОБКА С 50 БАЗИСНЫМИ ПЛАСТИНАМИ (ВЕРХН.)

Лабораторные материалы- ПЕМЗА 4.2

PLOVEC - pumice

НАЗНАЧЕНИЕ

PUMICE — ОЧИЩЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОЛИРОВАНИЯ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- МАТЕРИАЛ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
- ЛЁГКИЙ МЕЛКОПОРИСТЫЙ АБРАЗИВ
- ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩЕН

ЦВЕТА

WHITE (БЕЛЫЙ)

УПАКОВКА

05725 PLOVEC, 25 кг (МЕШОК)

05724 PLOVEC, 5 кг (КОНТЕЙНЕР)

Лабораторные материалы- ЩЕТКИ 4.3

BRUSHES

НАЗНАЧЕНИЕ

ЖЁСТКИЕ И МЯГКИЕ ЩЁТКИ, КОЖАНЫЕ И ХЛОПКОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ СПЛАВОВ, КЕРАМИКИ И АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЖЁСТКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЁТКИ
- МЯГКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЁТКИ
- КОЖАНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ
- ХЛОПКОВЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

УПАКОВКА

07888 ЩЕТКА С ХВОСТОВИКОМ

07882 FI 21, ЩЕТКА С ХВОСТОВИКОМ

07880 FI 48, ЩЕТКА БЕЗ ХВОСТОВИКА

07887 ЩЕТКА С ХВОСТОВИКОМ

07885 FI 21, ЩЕТКА С ХВОСТОВИКОМ

07881 FI 85, ВАЛИК БЕЗ ХВОСТОВИКА

07900 FI 100 40, ВАЛИК БЕЗ ХВОСТОВИКА

07901 FI 100 24, ВАЛИК БЕЗ ХВОСТОВИКА

poliVEST

НАЗНАЧЕНИЕ

POLIVEST — БЕЗУГЛЕРОДНАЯ ПРЕЦИЗИОННАЯ ФОСФАТНАЯ ПАКОВОЧНАЯ МАССА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЛИТЬЯ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ ВСЕХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЛАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЫСТРОГО ИЛИ ПОСТЕПЕННОГО НАГРЕВА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длительное время работы при 19–24°C: 4–7 минут
- Оптимальные текучие свойства облегчают формование и помогают предотвратить образование нежелательных пузырьков воздуха
- Точное регулирование расширения путем изменения концентрации жидкости для формования и воды
- Возможность быстрого нагрева сокращает время обработки и повышает производительность
- Легкое отделение от отлитого изделия после охлаждения

УПАКОВКА

05904 UNIVICAST (порошок) – 6 кг (40 x 150 г)

05825 POLISOL (жидкость) – флакон 1 л

poliTERM SPEED

НАЗНАЧЕНИЕ

POLITERM SPEED — это мелкозернистый формовочный материал для литья моделей, предназначенный как для быстрого выжигания, так и для традиционных методов медленного нагрева. Он подходит для изготовления съемных частичных протезов и высококачественных комбинированных реставраций.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- одинаково подходит как для дублирования гелем, так и для дублирования силиконом.
- Стандартный или быстрый нагрев с оптимальными показателями расширения.
- Быстрый предварительный нагрев: температура вставки составляет 600°C, что позволяет сэкономить время по сравнению с формовочными материалами, которые необходимо нагревать стандартным способом.

УПАКОВКА

05887 POLITERM SPEED (порошок) – 8 кг (20 x 400 г)

05825 POLISOL (жидкость) – флакон 1 л

poliPRESS

НАЗНАЧЕНИЕ

POLIPRESS — фосфатная паковочная масса, предназначенная для литьевого прессования пресс-керамики: цельнокерамических реставраций, керамики, прессуемой на циркониевый каркас, и керамики, прессуемой на металлический каркас.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- идеальная посадка
- Высокая степень точности
- Быстрый нагрев
- Высокая прочность на сжатие

УПАКОВКА

05934 POLI PRESS (порошок) – 6 кг (60 x 100 г)

05832 POLI PRESS (жидкость) – флакон 1 л

univeCAST

POLIZDENT CAST IS A RESIN DEVELOPED FOR 3D PRINTING BURNABLE OBJECTS USED IN METAL CASTING. WHEN COMBINED WITH UNIVECAST INVESTMENT MATERIAL, PRINTED OBJECTS ENSURE HIGH PRECISION, STABILITY, AND PROCESS REPRODUCIBILITY. A VALIDATED MATERIAL SYSTEM REDUCES THE RISK OF ERRORS AND GUARANTEES RELIABLE RESULTS.

НАЗНАЧЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОСФАТНАЯ ПАКОВОЧНАЯ МАССА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПАКОВКИ ВОСКОВЫХ ИЛИ 3D-ПЕЧАТНЫХ КОРОНОК, МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ И КАРКАСОВ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ИЛИ ПРЕССОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ОДНА ПАКОВОЧНАЯ МАССА ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ЛИТЬЯ, КОМБИНИРОВАННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЛИТЬЯ НЕБЛАГОРОДНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
- ПРОСТОЕ ЛИТЬЁ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЗКОЛЬЦЕВОЙ ТЕХНИКИ
- ДЛЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА ЦИЛИНДР ПОМЕЩАЮТ В ПЕЧЬ ПРИ КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫЖИГАНИЯ; ЛИТЬЁ ВОЗМОЖНО НАЧАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ЧАСА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ

УПАКОВКА

- 05904 UNIVECAST (ПОРОШОК) – 6 кг (40 x 150 г)
- 05825 POLISOL (ЖИДКОСТЬ) – ФЛАКОН 1 л

poliKORUND

НАЗНАЧЕНИЕ

POLIKORUND — высокоочищенный оксид алюминия (Al_2O_3) с содержанием 99,8 %, используемый для пескоструйной обработки стоматологических сплавов и керамических материалов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Острые зёрна и исключительно высокая твёрдость обеспечивают высокую эффективность пескоструйной обработки
- Лёгкий мелкопористый абразивный материал

ЦВЕТА

WHITE (Белый)

УПАКОВКА

- 05721 POLI KORUND 250 мкм – МЕШОК 25 кг
- 05722 POLI KORUND 110 мкм – МЕШОК 25 кг
- 05723 POLI KORUND 50 мкм – МЕШОК 25 кг
- 05755 POLI KORUND 250 мкм – КОНТЕЙНЕР 5 кг
- 05756 POLI KORUND 110 мкм – КОНТЕЙНЕР 5 кг
- 05757 POLI KORUND 50 мкм – КОНТЕЙНЕР 5 кг

ALABASTER

НАЗНАЧЕНИЕ

ALABASTER — универсальный стоматологический гипс 2-го типа, применяемый для изготовления моделей под индивидуальные оттисковые ложки при работе с частичными и полными съёмными протезами, моделей для ремонта и фиксации протезов, а также учебных и диагностических моделей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- БЕЛЫЙ ЦВЕТ, БЕЗ ЗАПАХА.
- СМЕСИ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ.
- СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ: ВОДА (мл) / гипс (г) – 60/100.
- РАСШИРЕНИЕ: 0,16 %
- ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ: 10–14 мин.
- ВРЕМЯ РАБОТЫ: 5–6 мин.

ЦВЕТА

WHITE (БЕЛЫЙ)

УПАКОВКА

- 05801 A LABASTER, 5 кг – П ЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
- 05720 A LABASTER, 20 кг – П ЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
- 05802 A LABASTER, 25 кг – МЕШОК

poliDUR

НАЗНАЧЕНИЕ

POLIDUR IS A HARD, TYPE 3 DENTAL PLASTER USED FOR MAKING MODELS FOR PARTIAL AND COMPLETE REMOVABLE DENTURES, ORTHODONTIC APPLIANCE MODELS, DENTURE REPAIR AND RETENTION, AND FOR STUDY AND DIAGNOSTIC MODELS.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- СИНИЙ ЦВЕТ, БЕЗ ЗАПАХА.
- СМЕСИ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ.
- СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ: ВОДА (мл) / гипс (г) – 30/100.
- РАСШИРЕНИЕ: 0,18 %
- ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ: 7–12 мин.

ЦВЕТА

BLUE (СИНИЙ)

УПАКОВКА

- 05754 POLIDUR, 5 кг – ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
- 05744 POLIDUR, 20 кг – ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
- 05864 POLIDUR, 25 кг – МЕШОК

poliSTONE

НАЗНАЧЕНИЕ

POLISTONE — это сверхтвердый стоматологический гипс 4-го типа, предназначенный для изготовления рабочих моделей, моделей антагонистов, моделей частичных и полных протезов, для использования в имплантологии, моделей ортодонтических аппаратов, моделей для ремонта и поддержки протезов, а также диагностических моделей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ, БЕЗ ЗАПАХА.
- СМЕСЬ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ И ДОБАВОК.
- СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ: ВОДА (мл) / гипс (г) – 22/100.
- РАСШИРЕНИЕ: 0,09 %
- ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ: 12–14 мин.

ЦВЕТА

BEIGE (БЕЖЕВЫЙ)

УПАКОВКА

- 05970 Полистон, МЕШОК 5 кг
- 06968 Полистон, КОРОБКА 20 кг / 4 МЕШКА по 5 кг
- 05830 Полистон, МЕШОК 25 кг

primaART

НАЗНАЧЕНИЕ

PRIMA ART — это твёрдый стоматологический гипс 1-го типа. Специальный гипс PRIMA ART применяется для фиксации моделей в артикуляторе, а также для работ, требующих короткого времени схватывания.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- БЕЛЫЙ ЦВЕТ, БЕЗ ЗАПАХА.
- Соотношение компонентов: вода (мл) / гипс (г) – 63/100.
- Незначительное расширение при схватывании: 0,09 %
- Короткое время схватывания: 3 мин.
- Короткое время работы: 60–90 сек.

ЦВЕТА

WHITE (Белый)

УПАКОВКА

05907 PRIMA ART, 5 кг – пластиковый контейнер

05908 PRIMA ART, 20 кг – пластиковый контейнер

primaROCK

НАЗНАЧЕНИЕ

PRIMA ROCK — высокопрочный супергипс 4-го типа, применяемый для изготовления рабочих моделей, моделей-антагонистов, моделей при работе с частичными и полными съёмными протезами, ортодонтическими аппаратами, ремонтом и поддержкой зубных протезов, а также для диагностических моделей и применения в имплантологии.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ, БЕЗ ЗАПАХА.
- Соотношение компонентов: вода (мл) / гипс (г) – 20/100.
- Незначительное расширение при схватывании: 0,13 %
- Короткое время схватывания: 12 мин.
- Короткое время работы: 6–8 мин.

ЦВЕТА

YELLOW (Желтый)

УПАКОВКА

05911 PRIMA ROCK, 2 кг – пластиковый контейнер

05925 PRIMA ROCK, 5 кг – пластиковый контейнер

05913 PRIMA ROCK, 20 кг – пластиковый контейнер

poliSILICONE

НАЗНАЧЕНИЕ

POLISILICONE — двухкомпонентный дублирующий силикон аддитивного отверждения для точного дублирования моделей в зуботехнических лабораториях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместим с камнем и фосфатными материалами.
- Модели легко извлекаются.
- Исключительная точность и стабильность размеров.
- Высокая эластичность.
- Твердость по Шору А: 24–26

ЦВЕТА

CATALYST - WHITE, BASE MATERIAL - PINK

КАТАЛИЗАТОР — БЕЛЫЙ, БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ — РОЗОВЫЙ

УПАКОВКА

06957 POLI SILICONE (Твердость по Шору 24) A+B

Материалы для стоматологической практики

5.1 ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

перчатки медицинские защитные

фартук медицинский защитный

PROTECTIVE MEDICAL GLOVES

перчатки медицинские защитные

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноразовые защитные перчатки для поддержания безопасности и гигиены при повседневной работе в стоматологической практике.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латекс
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СМОТРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ПЕРЧАТКИ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА — ХЛОРИРОВАННЫЕ, С МИКРОТЕКСТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
ЗЕЛЁНЫЕ ПЕРЧАТКИ — С АРОМАТОМ ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ

Нитрил
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НИТРИЛОВЫЕ СМОТРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

ЦВЕТА
NATUR, PEPPERMINT, BLUE
НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЕРЕЧНАЯ МЯТА, СИНИЙ

УПАКОВКА

Латекс
GLOVES KING CHLORINATED-MICRO-TEXTURED, НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ, 100 шт.
1. НЕОПУДРЕННЫЕ: 16525 XS, 16526 S, 16527 M, 16528 L
2. ОПУДРЕННЫЕ: 16535 XS, 16536 S, 16537 M, 16538 L
GLOVES KING PEPPERMINT FLAVOURED, ЗЕЛЁНЫЕ, 100 шт.
1. НЕОПУДРЕННЫЕ: 16560 XS, 16561 S, 16562 M, 16563 L
2. ОПУДРЕННЫЕ: 16520 XS, 16521 S, 16522 M, 16523 L

Нитрил
GLOVES KING NITRILE, СИНИЕ, 100 шт.
1. НЕОПУДРЕННЫЕ: 16529 S, 16517 M, 16519 L

PROTECTIVE MEDICAL APRON

фартук медицинский защитный

НАЗНАЧЕНИЕ

Одноразовые защитные фартуки для защиты пациентов во время стоматологических процедур. Изготовлены из целлюлозы, доступны в различных цветах. Непроницаемый и гигиеничный материал ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многослойная, высокоабсорбирующая 100% чистая целлюлоза
- Однослойный полиэтилен
- Водонепроницаемый

ЦВЕТА
GREEN, BLUE, WHITE, ORANGE, PINK
ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, БЕЛый, ОРАНЖЕВый, РОЗОВый

УПАКОВКА
07864 Фартук для ПАЦИЕНТА 53 x 80 см, ЗЕЛЕНый, рулон, 60 шт.
07865 Фартук для ПАЦИЕНТА 53 x 80 см, СИНИЙ, рулон, 60 шт.
07866 Фартук для ПАЦИЕНТА 53 x 80 см, БЕЛый, рулон, 60 шт.
07912 Фартук для ПАЦИЕНТА 53 x 80 см, ОРАНЖЕВый, рулон, 60 шт.
07914 Фартук для ПАЦИЕНТА 53 x 80 см, РОЗОВый, рулон, 60 шт.
07917 Фартук для ПАЦИЕНТА 33 x 45 мм, ЗЕЛЕНый, 500 шт.
07921 Фартук для ПАЦИЕНТА 33 x 45 мм, СИНИЙ, 500 шт.

- 6.1 SHELLAC BASE PLATES
- 6.2 SCULPTURING WAX SPEZIAL
- 6.3 FLEXISTONE Standard
- 6.4 FLEXISTONE Plus
- 6.5 SILAPLAST Futur
- 6.6 SILAPLAST Futur cat f - lyquid
- 6.7 SILASOFT Normal
- 6.8 CAT P UNIVERSAL Futur - paste
- 6.9 BLUE ECO
- 6.10 BLUE ECO STONE

SHELLAC BASE PLATES

НАЗНАЧЕНИЕ

ШЕЛЛАКОВЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ — ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ. НАТУРАЛЬНЫЕ ШЕЛЛАКОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТИСКНЫХ ЛОЖЕК И ПРОТЕЗОВ — БАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ ПРИКУСА И ВЫРАВНИВАНИЯ ЗУБОВ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПРОСТОТА И РАВНОМЕРНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА.
- СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ (СОХРАНЯЮТ ФОРМУ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕРКИ В ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТА).
- ВЫПУСКАЮТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ — ДЛЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.
- Толщина материала — около 1,3 мм.

ЦВЕТА

Pink (розовый)

УПАКОВКА

15114 Верхняя челюсть, 100 пластин

SCULPTURING WAX SPEZIAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Воск для лепки SCULPTURING WAX SPECIAL — это базовый воск летнего качества (среднетвердый) и зимнего качества (мягкий) для изготовления полных и частичных протезов, кромочных валиков и регистрации прикуса, а также для моделирования восковых пластин.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СРЕДИ БАЗИСНЫХ ВОСКОВ
- ЛЕТНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАСТЫВАНИЯ 56 °С и зимний с температурой застывания 54 °С
- РАЗМЕР ОДНОЙ ПЛАСТИНЫ: 175 x 80 мм.
- Толщина пластины: 1,5 мм.

ЦВЕТА

Pink (розовый)

УПАКОВКА

12166 Зима, 500 г

12040 Лето, 500 г

FLEXISTONE Standard

НАЗНАЧЕНИЕ

FLEKSISTONE STANDARD — это изоляционный и моделирующий МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ ЗА ОДИН ШАГ НА АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ И ВОСК, ОБРАЗУЯ ТОНКИЙ, ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ. РЕПЛИКАЦИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- на основе C-силикона
- ЛЕГКИЙ
- с отличной стабильностью
- очень высокой конечной твердостью (75 единиц по Шору А)
- Для изоляции акриловых или фарфоровых зубов при заливке ормочной массой

ЦВЕТА

GREEN (ЗЕЛЕНый)

УПАКОВКА

06966 Бутылочка с держателем (350 г)
190 мл / катализатор, бутылочка 30 мл
Емкость для смешивания, 1 шт.

FLEXISTONE Plus

НАЗНАЧЕНИЕ

FLEKSISTONE Plus — это изоляционный и моделирующий МАТЕРИАЛ для изоляции зубных протезов в процессе формования.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- на основе А-силикона
- ЛЕГКИЙ
- с отличной стабильностью
- очень высокой конечной твердостью (85 единиц по Шору А)
- Оптимальная текучесть при шпатлевании
- Защита акриловых материалов и акриловых зубов от гипса
- Простое нанесение — система смешивания 1 : 1
- Особенно показан для использования в технике литья под давлением

ЦВЕТА

Base blue, Catalyst white 1:1
основа — голубой, катализатор — белый 1:1

УПАКОВКА

06863 Бутылочка (основа), 160 мл, с держателем
Бутылочка (катализатор), 160 мл, с держателем
Емкость для смешивания, 1 шт.

SILAPLAST Futur

Высокоточный оттисковый силикон для зубного протезирования, предназначенный для корректирующих оттисков в двухэтапной технике, одноэтапной техники двойного смешивания и анатомических оттисков.

SILAPLAST Futur - putty

НАЗНАЧЕНИЕ

SILAPLAST Futur – это высоковязкий базовый материал для высокоточного оттискового силикона, предназначенного для использования в зубопротезировании.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- очень высокая вязкость, мягкопластичная начальная
- консистенция – идеальные конечные твердость и эластичность.
- Новый состав, меньшая усадка по сравнению с обычными С-силиконами.

ЦВЕТА

white (Белый)

УПАКОВКА

06746 Банка, 900 мл

Подходящие катализаторы:

SILAPLAST Futur cat f - liquid

НАЗНАЧЕНИЕ

SILAPLAST Futur – liquid — катализаторная жидкость для материала SILAPLAST Futur Putty.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- качественные катализаторы для С-силиконов
- с новой матрицей (отвердитель)
- гипоаллергенные, с приятным запахом и вкусом
- Голубой цвет для точного дозирования и контроля смешивания

ЦВЕТА

blue (голубой)

УПАКОВКА

06924 Бутылочка, 50 мл

SILASOFT Normal

НАЗНАЧЕНИЕ

SILASOFT Normal — это корректирующий материал в виде спрея, предназначенный для коррекционных оттисков (двухэтапная техника), техники двойного смешивания и анатомических оттисков (одноэтапная техника), а также для перебазировки зубных протезов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- текучая консистенция
- новый состав
- предназначен для снятия двухэтапных оттисков как корректирующий материал первичного оттиска
- может использоваться с катализаторной пастой cat p universal futur

ЦВЕТА

ROSE-OPAQUE (розово-опаловый)

УПАКОВКА

06751 Бутылочка, 160 мл

Подходящие катализаторы:

CAT P UNIVERSAL Futur - paste

НАЗНАЧЕНИЕ

CAT P UNIVERSAL Futur — это катализаторная паста, подходящая для использования с шпатлевкой Silaplast Futur Putty.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- качественные катализаторы для C-силиконов
- с новой матрицей (отвердитель), гипоаллергенные
- с приятным запахом и вкусом
- голубой цвет для точного дозирования и контроля смешивания.

ЦВЕТА

BLUE (голубой)

УПАКОВКА

06845 Тюбик, 35 мл

BLUE ECO

НАЗНАЧЕНИЕ

BLUE ECO — это шпатлевка для зуботехнической лаборатории, предназначенная для универсального применения (надежная фиксация искусственных зубов, сборных конструкций, прикусных валиков, моделей, изоляция зубов в кюветах и т. д.)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- аддитивное отверждение
- очень высокая вязкость,
- легко поддающаяся замешиванию консистенция
- Точное воспроизведение деталей
- стабильность формы и объема, гладкость, термостойкость до 200 °С
- стандартная конечная твердость — 86 единиц по Шору А
- отличные механические свойства, легко режется
- высокая экономичность
- оптимальный контроль смешивания за счет контрастных цветов

ЦВЕТА

BASE BLUE, CATALYST BEIGE 1:1

ОСНОВА — ГОЛУБОЙ, КАТАЛИЗАТОР — БЕЖЕВЫЙ 1:1

УПАКОВКА

06952 Банка (основа), 800 г

Банка (катализатор), 800 г

Ложечки мерные, 2 шт.

BLUE ECO STONE

НАЗНАЧЕНИЕ

BLUE ECO STONE — это лабораторная шпаклевка на основе А-силикона для универсального применения (изготовление сборных конструкций, прикусных валиков, моделей для реставрации зубных протезов, блокировок и т. д.)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокая вязкость, гладкая начальная консистенция
- Высокая четкость
- стабильность размеров, особая гладкость, термостойкость до 200 °С
- Очень высокая конечная твердость, около 96 единиц по Шору А
- Высокая экономичность
- легко режется

ЦВЕТА

BASE DARK BLUE, CATALYST WHITE 1:1

ОСНОВА — СИНИЙ, КАТАЛИЗАТОР — БЕЛЫЙ 1:1

УПАКОВКА

06918 Банка (основа), 800 г

Банка (катализатор), 800 г

Ложечки мерные, 2 шт.


Мы осуществляем продажи в следующие страны:



АЛБАНИЯ
АЛЖИР
АРМЕНИЯ
АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
АЗЕРБЕЙДЖАН
БАНГЛАДЕШ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛЬГИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
БОЛГАРИЯ
КАНАДА
ЧИЛИ
ХОРВАТИЯ
КИПР

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДАНИЯ
ЕГИПЕТ
ЭСТОНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГРУЗИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГРЕССИЯ
ГВАТЕМАЛА
ВЕНГРИЯ
ИСЛАНДИЯ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИРАН

ИРЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
ЯПОНИЯ
ИОРДАНИЯ
КОСОВО
КУВЕЙТ
КИРГЫЗСТАН
ЛАТВИЯ
ЛИВАНИЯ
ЛИВИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
МАЛЬТА
МОЛДОВА
МОНАКО
ЧЕРНОЧНАЯ

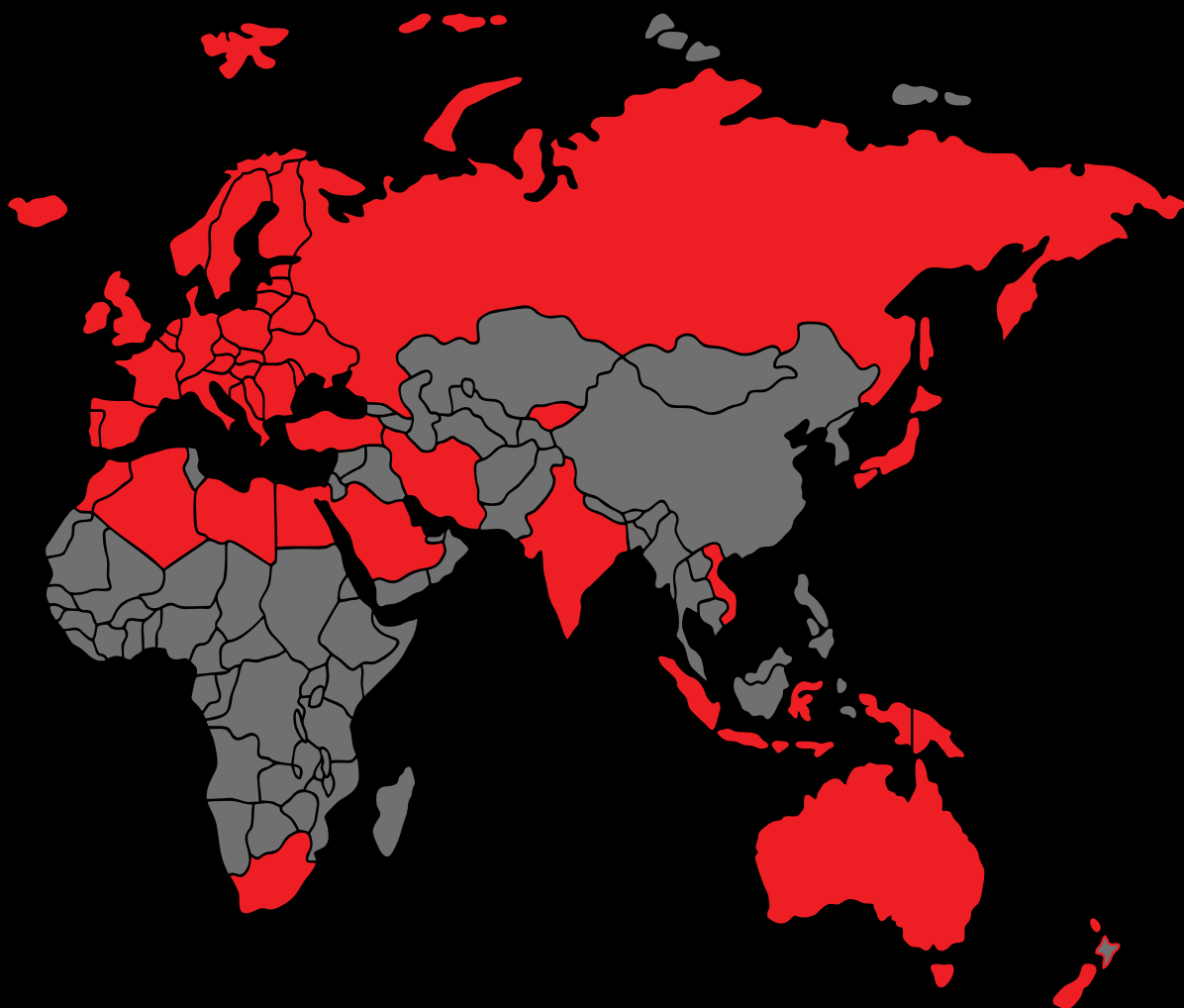


МАРОККО
НИДЕРЛАНДЫ
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СЕВЕР МАКЕДОНИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
ОСТРОВ РЕЮНИОН
РУМЫНИЯ

САУДОВСКАЯ АРАБИЯ
СЕРБИЯ
СЕЙШЕЛЛЫ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ИСПАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ТУРЦИЯ

ОАЭ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
УКРАИНА
США
ВЬЕТНАМ

...но продолжаем искать новые возможности.

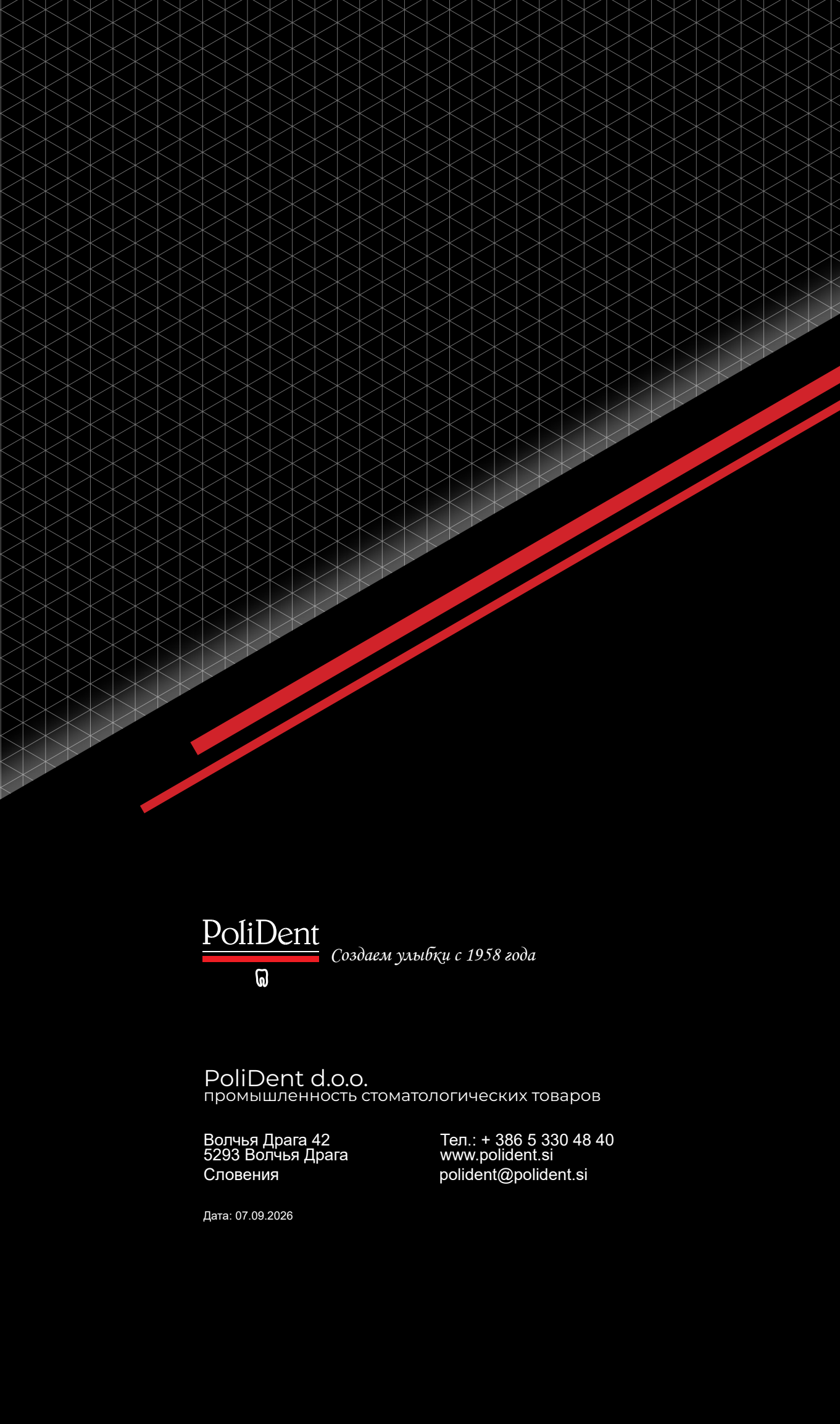

PoliDent

Создаем улыбки с 1958 года



PoliDent d.o.o.

промышленность стоматологических товаров

Волчья Драга 42
5293 Волчья Драга
Словения

Тел.: + 386 5 330 48 40
www.polident.si
polident@polident.si

Дата: 07.09.2026